


CATÉTER DE TERMODILUCIÓN

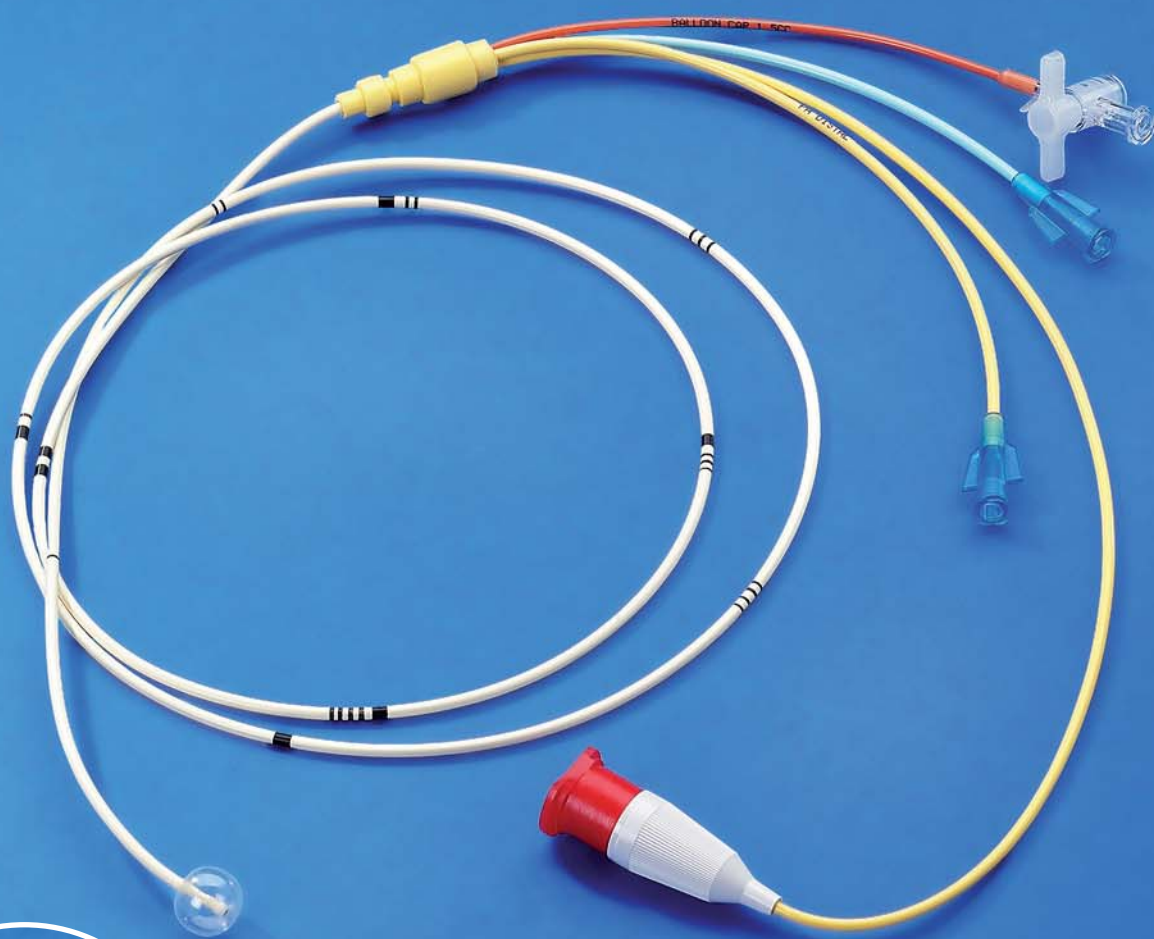

CATÉTER DE TERMODILUCIÓN

Los catéteres de termodilución de flujo directo han sido diseñados para el uso en pacientes de cuidados críticos para medición de gasto cardiaco, presiones de enclavamiento capilar pulmonar, arterial pulmonar y aurícula derecha. Permite controlar permanentemente la temperatura arterial pulmonar, tomar muestras de sangre, administrar drogas y soluciones en forma endovenosa.

Catéter de Termodilución

	CATER-450	CATER-470	CATER-575
Largo Util (cm)	90	110	110
Número de Lumenes	4	4	5
Calibre en Fr.	5	7	7,5
Medida de Introductor (Fr.)	6	8	8,5
Volumen del Balón (CC)	0,75	1,50	1,50
Tiempo de Desinflado Max (s)	5	5	5
Resistencia del termistor a 37° C (ohms)	14k	14k	14k
Frecuencia Natural (Hz)	30	32	32

Cuerpo de Poliuretano.

Balón de látex.

Optima simetría del balón.

El termistor es compatible con la mayoría de los monitores de gasto cardíaco.